

Dagelijks uw bloeddruk meten - een belangrijk onderdeel van het bewaken van uw gezondheid

Hoge bloeddruk is de voornaamste beïnvloedbare risicofactor voor beroerten


Algemeen voorkomende risicofactoren, zoals stress, overgewicht, roken, diabetes en erfelijke aanleg kunnen een ziekelijke verhoging van de systolische bloeddruk (bovendruk, veroorzaakt door het samentrekken van het hart) en de diastolische bloeddruk (onderdruk, tijdens het ontspannen van het hart) veroorzaken.

Hoge bloeddruk blijft vaak onopgemerkt, omdat er doorgaans geen symptomen waar te nemen zijn

Daarom is het belangrijk om regelmatig zelf de bloeddruk te meten. Dit geeft u de gelegenheid om preventieve maatregelen te nemen of om het effect van medicamenten die u gebruikt te volgen.

Preventie en behandeling zijn van essentieel belang

Het veranderen van uw voedingsgewoonten, afvallen, stoppen met roken en regelmatig lichaamsbeweging nemen kunnen een gunstige invloed hebben. Andere (behandel-)mogelijkheden zijn uiteraard zaken die u aan uw arts dient over te laten.

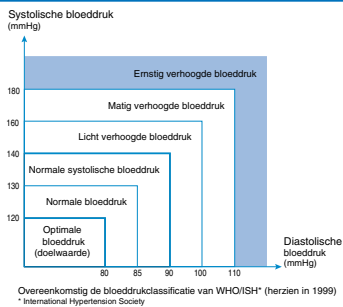

Bovenarm-bloeddrukmeter met comfort manchet

(standaard en groot in 1 manchet)



Bloeddrukmeters • Thermometers • Vernevelaars
Lichaamsvetmeters • TENS apparatuur • Stappentellers

Neem contact met ons op, wij zullen u graag adviseren



M7 + Comfort manchet

OMRON

De Omron M7 is de perfecte bloeddrukmeter voor wie optimaal bedieningsgemak verlangt en minimale druk op de arm tijdens het meten

Comfort manchet (standaard en groot in 1 manchet)

De Omron M7 heeft de unieke ML comfort manchet.

Deze manchet is geschikt voor een armomtrek van 22 tot 42 cm, in feite voor bijna alle volwassenen, ook met een grote bovenarmomtrek. Daardoor kan de M7 bijvoorbeeld door verschillende personen in een gezin worden gebruikt, maar ook door (para) medici met allerlei verschillende patiënten.

Niet alleen de manchet draagt bij aan het gebruiksgemak van de Omron M7, er is meer:

Intellisense – intelligent oppompen zonder pijn

De unieke Intellisense oppomptechniek maakt snel en pijnloos oppompen mogelijk. De manchet wordt geheel automatisch tot de juiste druk opgepompt, nooit te ver.

Klinisch gevalideerde meetnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van het in de Omron M7 gebruikte algoritme is wetenschappelijk aangetoond volgens het AAMI protocol. Hiermee voldoet OMRON aan de hoogste eisen van de medische professie en verzekert u van een langdurig betrouwbaar gebruik.



Geavanceerde geheugenfuncties

Met 90 geheugenplaatsen is het haast onnodig om de gemeten bloeddrukwaarden te noteren. Zelfs als er 3 maal per dag wordt gemeten kan het geheugen de gegevens van een maand bevatten. Alle metingen worden bewaard inclusief datum en tijd. Na het indrukken van de geheugen-toets toont de Omron M7 automatisch het gemiddelde van de laatste 3 metingen (AVG). Vervolgens kunnen alle opgeslagen metingen worden opgeroepen.

Overige kenmerken:

- Intellisense technologie voor snel en eenvoudig meten.
- Grote, gemakkelijk afleesbare displays, waarop bloeddruk en hartslag gelijktijdig worden getoond.
- Grote, functionele bedieningsknoppen.
- Dankzij de stevige royale opbergcassette, met ruimte voor de manchet, is de Omron M7 zeer geschikt voor ambulante gebruik, uitleen en verhuur.
- Met de als optie leverbare lichtnetadapter is de meter altijd klaar voor gebruik en bespaart u op de kosten van batterijen.

